

白内障手術器具

計画的囊外及び超音波乳化吸引手術
CATARACT SURGERY (ECCE & Phacoemulsification)



A Passion for a Nice View

S-3L
S-3S**M.Q.A.***

特殊急速吸水紙

PAT. No.1119401



●M.Q.A. 大箱 (小箱×5個)

・小箱1個には、M.Q.A.15ヶ入小袋が
20個、計300個入っています。

特 徴

1. ほとんど瞬間的に多量の液体を吸収する。
使用前は厚紙状であるが液体吸収後は
スポンジ状に柔軟で伸縮自在になり自重の
約20倍の重量の液体を吸収する。
2. 綿の様に微細な繊維を残存させる可能性
はほとんどありません。

**S-3H**

M.Q.A.ホルダー

**M-1616**

M.Q.A. ホルダー、クロスアクション

◎簡便な、クロスアクション式ホルダーで比較的安価な製品です。

S-4L (大箱) 小箱×5箱入 (計50本)**S-4S** (小箱) M.S.S.10本入
E.O.G. Sterile**M.S.S.*** PAT. PEND.
(MIZUNO SUCTIONING SPONGE)


本品は、眼科用に開発された吸引器用スポンジで、
吸引器に接続して用いることにより、液体及び術
部よりの出血等を持続的に吸引除去することが出
来ます。本品は、綿の様な微細な繊維等を眼内異
物として、術部等に残存させることはありません。



M.Q.A.

エコスティック S-77ESL/S-77ESS

吸収部分は“M.Q.A.*”と同材質です。

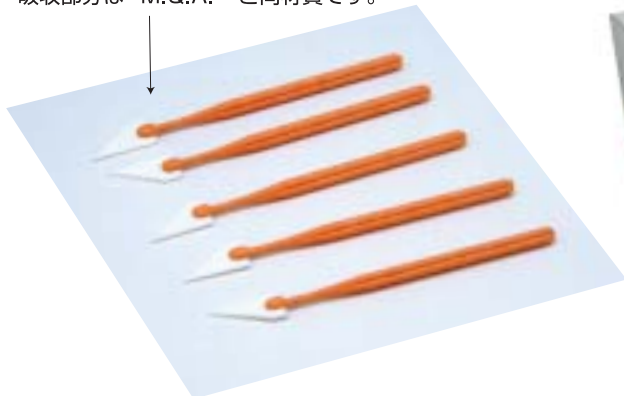

M.Q.A.エコスティックはスティック部分に容器リサイクル法による可燃性素材を使用しています。



S-77ESL

S-77ESS×12箱入

S-77ESS

1箱100本入

(5本入 滅菌パック×20袋)

■ シャーポイントナイフ・アイシールド

ビットナイフ(ヴィトレクトミーナイフ)



71-1901 19G 柄付
71-2001 20G 柄付

スタブナイフ



72-1501 15° 刃 柄付
72-2201 22.5° 刃 柄付

クリアコーニアナイフ



72-2663 2.65mm アングル、目盛付 柄付
72-2763 2.75mm アングル、目盛付 柄付
72-2863 2.85mm アングル、目盛付 柄付
72-3061 3.0mm アングル、目盛付 柄付
72-3263 3.2mm アングル、目盛付 柄付

クレセントナイフ



74-1010 アングル、柄付、ベベルアップ
74-1020 アングル、柄付、ベベルダウン
74-1031 アングル、柄付、ダブルベベル

スリットナイフ ベベルアップ




72-2661 2.65mm アングル、柄付、ベベルアップ
72-2761 2.75mm アングル、柄付、ベベルアップ
72-2861 2.85mm アングル、柄付、ベベルアップ
72-2961 3.0mm アングル、柄付、ベベルアップ
72-3261 3.2mm アングル、柄付、ベベルアップ

●クリアアイシールド(50個/1箱)



透明のプラスチック保護眼帯は数カ所の穴により曇りを防ぎます。 サイズ:


G-701	クリアアイシールド左右兼用
G-702	クリアアイシールドカバー付各種色 左右兼用
G-703	クリアアイシールドカバー付1色 左右兼用

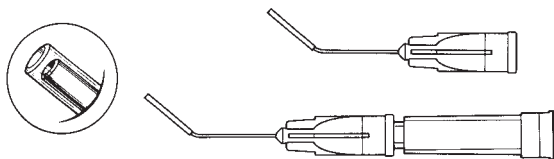

33-2101
眼内レンズスムーバー



M-1512
永田氏経結膜球後針(テノン嚢下麻酔針)
25G 曲 (曲率半径: 28mm)
Cannula, Sub-Tenon, NAGATA:
25G, curved(radius: 28mm).

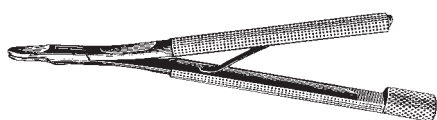

M-40RS
マイクロサージャリー用替刃パンチ 直
全長: 96mm
Razor Blade Breaker and Holder.
straight with round handle and end lock.
For Microsurgery.



M-88H
ヒアルロン酸ナトリウム塩注入針
アングル型 25G 10×9mm
Cannula, Viscoelastic Material
(Sodium Hyaluronate) Injection. 25G.

M-88GH
ヒアルロン酸ナトリウム塩注入針
アングル型 23G 10×9mm
Cannula, Viscoelastic Material
(Sodium Hyaluronate) Injection. 23G.



M-91
川野式前房灌流カニューラ
内径0.42mmの特殊23Gパイプ製
吸引力の強い吸引針に対応できる充分な
灌流液を注入します。



M-91A
川野式上方皮質吸引針、吸引ポート 0.3mm
内径0.42mmの特殊23Gパイプ製

M-91B
川野式上方皮質吸引針、吸引ポート 0.4mm
内径0.42mmの特殊23Gパイプ製
◎両針とも通常の23G吸引針よりも
強い吸引力があります。



M-95
深作式上方皮質吸引針 23G
Cannula superior cataractus material
aspirating, FUKASAKU.



33-2111
チストーム



S-217AS 直
S-217AC 曲
アトキンソン氏球後注射針 直・曲 23G
Needle, Retrobulbar, ATKINSON: 23G



M-838
深作式ピンポイント麻酔針 24G
(テノン嚢下麻酔針)

M-839
深作式 同 26G
(テノン嚢下麻酔針)




M-150
特殊ステンレス製替刃
10枚入り(ドイツ製) 無滅菌
Razor Blade, Stainless steel.




S-217S 直
S-217C 曲
小川氏眼球摘出用球後注射針
直・曲 23G
Needle, Retrobulbar, OGAWA: 23G



S-475L 大
S-475S 小
クレンメ 大・小
大: 47mm 小: 36mm
Serrefine: large and small, for keeping
sutures out of the operative field.

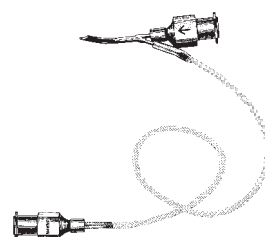


M-104
シムコ吸引灌流カニューラ
オリジナルモデル
23G 0.3mmポート
Aspiration/Irrigation Unit, SIMCOE:
double barreled, 23G with 0.3mm
aspiration port. original model.

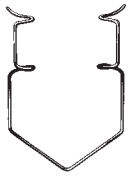


M-135D

深作氏 ワイヤー開瞼器
スプリング部ワイヤー
直径0.8mm
Speculum, FUKASAKU.

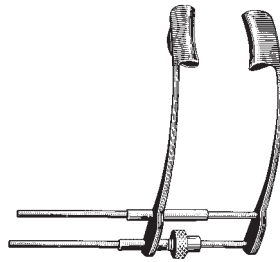


S-814

バンガーター氏開瞼器 左・右、小
Speculum, Eye, BANGERTER : small size,
left and right.

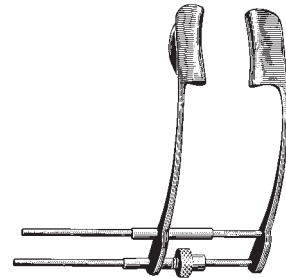


S-813

バンガーター氏開瞼器 左・右、大
Speculum, Eye, BANGERTER : standard size,
left and right.
Specially designed for cataract operations.

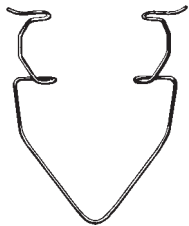


M-135F

深作氏 ワイヤー開瞼器Ⅱ型
スプリング部ワイヤー 直径0.8mm
Speculum, FUKASAKU, ModelⅡ.

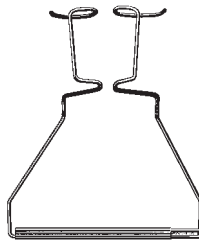


M-2007

深作/バラッケー氏 スライディング開瞼器
オープン型 ワイヤー 直径0.8mm
Speculum, FUKASAKU/BARRAQUER

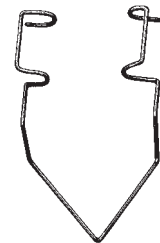


M-236A

永原式 テンポラルアプローチ開瞼器 オープン型
スプリング部ワイヤー 直径0.9mm
Temporal approach speculum,
NAGAHARA : open model.

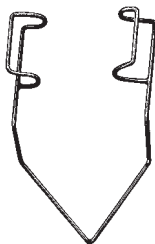


M-236B

永原式 テンポラルアプローチ開瞼器 クローズ型
スプリング部ワイヤー 直径0.9mm
Temporal approach speculum,
NAGAHARA : closed model.

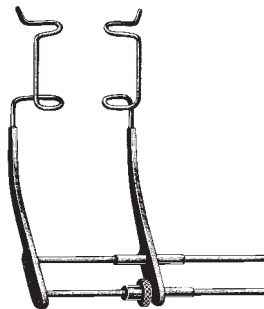

M-813R

バンガーター氏 開瞼器 大、右、オープン型
Speculum, Eye, BANGERTER : large,
right, open wire model.

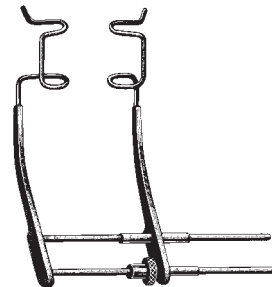

M-814R

バンガーター氏 開瞼器 小、右、オープン型
Speculum, Eye, BANGERTER : small,
right, open wire model.




M-236C


永原式 テンポラルアプローチ開瞼器 プレート型
スプリング部ワイヤー 直径0.9mm
Temporal approach speculum,
NAGAHARA : plate model.




M-2052

永原式吸引付開瞼器

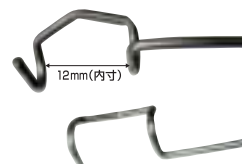


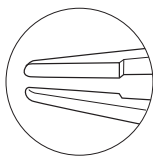


MB-010 結紮鑷子 直 0.3mm 段付 全長90mm
タングステンカーバイド

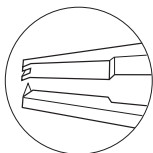


MB-011 縫合鑷子 直角型有鉤 0.12mm 段付 全長90mm
タングステンカーバイド

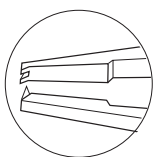


MB-011F 縫合鑷子 直角型有鉤 0.1mm 段付 全長90mm
タングステンカーバイド

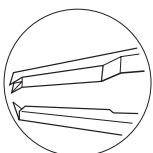


MB-012 縫合鑷子 直 前方突出型 有鉤 0.12mm 段付
全長90mm タングステンカーバイド

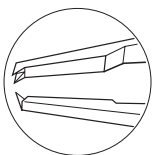

MB-012F 縫合鑷子 直 前方突出型 有鉤 0.1mm 段付
全長90mm タングステンカーバイド

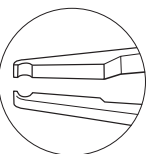

MB-013 縫合鑷子 直 ノッチ付 0.3mm 段付 全長90mm
タングステンカーバイド

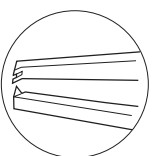


MB-J101W 三島式角膜鑷子 オリジナルモデル 0.1mm
全長80mm タングステンカーバイド



MB-040 眼内レンズ折り曲げ用鑷子 全長107mm



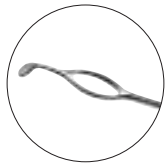

M-1160

福山・吉富式核分割コブラシャフトスパーテル

太宰府 吉富眼科 吉富文昭先生、大牟田市 ふくやま眼科 福山 誠先生のアイデアにより開発された製品です。超音波白内障手術で、分割または破砕された水晶体核片の角膜内皮への衝突による角膜内皮障害を起因とする合併症(術後の角膜浮腫、混濁、硬い核の角膜内皮への衝突が著しい場合に起因する水泡性角膜症等)の防止を目的として開発されました。核乳化吸引中、角膜内皮に向かって浮上してくる形状が不規則な核片を押さえながら操作ができるように設計されたコブラの形状に似た二本の並んだシャフトを備えた innovative な製品です。



M-1160N

コブラシャフトフェコチョッパー

太宰府 吉富眼科 吉富文昭先生、大牟田市 ふくやま眼科 福山誠先生のアイデアにより開発されたM-1160 福山・吉富式核分割コブラシャフトスパーテルのフェコチョッパーバージョンです。

山口県 新南陽市 ふなつ眼科 船津浩彦先生が永原先生、吉富先生のご了解を得られ、M-136N永原式フェコチョッパーのシャフトを modify した新しいフェコチョッパーの開発を計画され、当社に製作を依頼され、完成した製品です。



M-2053

深作式核分割用水流スパーテル “ハイドロチョッパー” 23G

超音波白内障乳化吸引手術に新しく開発された水流の力を利用する核分割スパーテル(ハイドロチョッパー)です。1.4mm幅の角膜切開創を通して水晶体核内に挿入する。核がグレード3より硬い場合は水晶体核の反対側に深作式スナップアンドスプリットフックをあてがい、水晶体を抱くようにすると容易に核内に挿入できます。空洞になったスパーテル両側の直径0.2mmの穴からBSSを注射筒でジェット水流として噴出させ水晶体核を二分割、さらに四分割させることができます。ハイドロチョッピングテクニックにより、マイクロインシジョン白内障手術をより安全、迅速におこなうことが可能になります。

国際出願申請



分割君ライトハンドルシリーズ

重量6g(M-136LH)従来の分割君(M-136)より2g軽く、ワイドセレーションハンドルに切れ込みを入れ、手術用手袋装着時により一層すべりにくなりました。又、ハンドルに切れ込みを入れておりますので、ハンドル内に入った水分などの排出のために、ハンドルの後方は空洞となっております。



M-136LH
分割君ライト



M-136KLH
核分割スパーテル
(Kバージョン)ライト



M-136LLH
核分割スパーテル
(ロングバージョン)ライト



M-136NLH
永原式フェコチョッパー ライト



M-127SLH シンスキー氏型
眼内レンズポジショニングフック 直 ライト



M-127CLH シンスキー氏型
眼内レンズポジショニングフック 曲 ライト



M-128SLH
眼内レンズプッシュアンドプル鉤 直 ライト
シアリングレンズ用

M-128CLH
眼内レンズプッシュアンドプル鉤 曲 ライト
シアリングレンズ用

**M-5R**

マイクロ角膜縫合鑷子 0.12mm
C型 ウルトラファイン 全長：85mm
Forceps, Corneal Suturing, Type C:
ultra fine, with platform.

**M-1R**

マイクロ結紮鑷子 M型 全長：83mm
Forceps, Tying, Type M.

**M-180**

バラッケー氏コリブリ鑷子
(角膜、結膜縫合用)
ウルトラファイン 全長：78mm
Forceps, BARRAQUER: Colibri.

**M-160R**

眼内レンズ・前嚢用鑷子 ギャスキン型
全長：100mm
I.O.L. Implant and Capsule Fragment
Forceps, GASKIN.

**M-1630** 河合氏角膜縫合鑷子 0.12mm コリブリ型

東海大学病院眼科 河合憲司先生のご指導により製作された製品です。手術用手袋装着時にノンスリップの安定した操作ができるようなハンドルを備えたウルトラファインコリブリタイプ鑷子です。

**S-410**

ボン大学式 虹彩鑷子 直 全長：73mm
Forceps, Iris; BONN: straight, with extra fine teeth.

**M-136**

分割君(徳田式) 核分割フック
柄より先端までの長さ：18.5mm
M-136 Nucleus Dividing & Separating Hook.
TOKUDA: original model. Tip size: 0.6×1.0mm

**S-9A**

三島式 結膜鑷子 全長：80mm
Forceps, Suturing MISHIMA.

**M-128S 直 M-128C 曲**

眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤
シアリングレンズ用
柄より先端までの長さ：25mm
Iris hook and lens manipulator;
push and pull model.

**M-136N**

永原式フェコチョッパー™
柄より先端までの長さ：16mm
PHACO CHOP™ and PHACO CHOPPER™ are
trademarks of Kunihiro Nagahara M.D.

**KI-1136 J**

湖崎式 核分割フック "J-MAX"
Nucleus Dividing & Separating Hook,
KOZAKI HOOK: "J-MAX"

**M-1101**

Mフック™ 核分割用フック
柄より先端までの長さ：22mm
M-Hook™: MINAMI: for nucleus dividing & separating.

**M-1100**

深作式スナップアンドスプリット フック、核分割用
柄より先端までの長さ：17mm
Snap and Split Hook, FUKASAKU:
nucleus dividing & separating.

**M-127S 直 M-127C 曲**

シンスキー氏型 眼内レンズポジショニング用フック
柄より先端までの長さ：18mm 先端の太さ：0.20mm
Micro lens hook for Shearing lens, SINSKEY.



M-1155

山田式 核分割スパーテル

関西医科大学付属病院眼科 山田晴彦先生のご指導で製作された核分割スパーテルです。

「分割君」(徳田式分割フック)や永原式フェコチョッパーは柔らかい核分割が難しい。

また、チョッパーは、分割後の核のマニピュレーションにコツが必要であった。

山田式核分割スパーテルは、「分割君」のヴァリエーションモデルとして作られた藤川先生のロングヴァージョンを基本にして先端を片側に刃(エッジ)をつけ、前房内水晶体核と平行に保持した状態から核の中にめり込むように先を回転させることで、「羊羹のように」核を切断・分割が可能である。分割後は、「分割君」と同様に核のマニピュレーションが容易で、より洗練された核処理が可能となる器具である。」

Nucleus Dividing & Separating Spatula-hook, YAMADA:

with one side edged oval tip facilitating soft nucleus dividing manipulations.



MF-808

イリゲーションチョッパー



M-167C

西氏エンドカプスラー剪刀

先端 曲刃 全長: 85mm

アングル付

Scissors, Endocapsular Surgery,

NISHI: with tip curved angular blades.



M-520

マイクロ ウェストコット剪刀 鈍 全長: 100mm

Scissors, Microsurgery, WESTCOTT: slightly curved, blunt.



M-57XL

トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀

ファインブレードモデル 左 全長: 98mm

ハイグレードステンレス製

Scissors, Corneal Section, TROUTMAN:

fine blade model, left.



M-57XR

トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀

ファインブレードモデル 右 全長: 98mm

ハイグレードステンレス製

Scissors, Corneal Section, TROUTMAN:

fine blade model, right.



S-511C 反

S-511S 直

スプリングハンドル式剪刀 反・直 全長: 108mm

Scissors, Eye: straight and curved, pointed.



- MF-801** 河合氏 CCC 鑷子 テーバード 23/25G 滅菌ケース付
東海大学病院眼科 河合憲司先生のご指導により開発された製品です。
- シャフト及び先端は反射防止処理済
 - 先端部長さ：1.7mm、ノンスリップセレーションタイプ
 - ◎サイドポートからのCCC操作を容易にしてくれるマイクロカプシュロレクシス鑷子です。



23G/25G テーバードシャフト



専用滅菌ケース



- M-1611**
カプシュロレクシス鑷子 ラウンドハンドルタイプ
Forceps, Capsulorhexis, with round handle.



- M-1612**
稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 VI 全長：110mm
Inamura Small Incision Capsulorhexis Forceps VI.
Designed by: Mikio Inamura, M. D., Yokohama, Japan



- M-729**
カストロヴィーホー氏持針器 N.G. 直 全長：140mm
Needle Holder, CASTROVIEJO : with lock, straight. Non-glare surface.




- M-730**
カストロヴィーホー氏持針器 N.G. 曲 全長：140mm
Needle Holder, CASTROVIEJO : with lock, curved. Non-glare surface.



- M-1902TH**
マイクロ持針器“ツイストヒンジ” 止なし 全長：100mm

- ◎スプリングハンドル型持針器の支点部（ヒンジ）はその耐久力を超える力で針を把持したり、大きめの針を把持すると構造的に弱い部分にストレスが加わり、金属疲労によりヒンジ部から折損したり、持針器の先端が開き、細かい縫合糸を滑らずに把持できなくなります。
- ◎このマイクロ持針器“ツイストヒンジ”はヒンジ部に薄く、弱い部分が無く、強力な捻りを加えられたヒンジ面は材質がタフになり、表面は完全に鏡面研磨されているので腐食等による作動不良を起こさず、従来のスタンダードヒンジ型持針器の数倍以上（当社従来型製品比）の頑丈さと耐久性のある製品です。
- ◎微細な4mm、5mmの針から、10mm程度の大きめの縫合針、微細な10-0縫合糸から太めの5-0縫合糸まで広範囲に使用可能で先端が開いたり、ヒンジ部の折損がありません。
- ◎ヒンジ部には切削加工によるエッジがなく、段差の角に縫合糸が引っかかりたり切断されたりすることがありません。
- ◎手術用手袋の装着時に対応の滑りにくいワイドセレーションハンドル付。
- ◎頑丈さのキャッチコピーは“タフですが、ペンチの代わりに釘は抜かないで”であります。

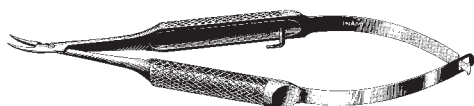

K.I. No.45

湖崎氏マイクロサージャリー用持針器 止付

全長：105mm


Needle Holder, KOSAKI:
for Microsurgery, curved, with lock. N.G.

K.I. No.46

湖崎氏マイクロサージャリー用持針器 止なし

全長：105mm

Needle Holder, KOSAKI:
for Microsurgery, curved, without lock. N.G.

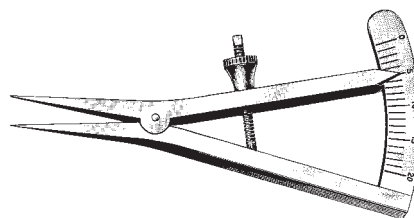

S-200

カストロヴィーホー氏カリパー 直

手術部位の測定、ディヴァイド、
及びマーキングなど便利で正確な手術が出来る。


Marker & Dividing Caliper, CASTROVIEJO: straight.



S-331

ソーブ氏角膜異物鉗子 全長：110mm

Forceps, Corneal & splinter, THORPE.

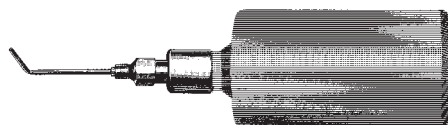

S-213S

ビショップ・ハーモン氏 前房洗滌器

針付：シリコンバルブ

Anterior Chamber Irrigator, BISHOP/HARMON,
with cannula and blue silicone bulb.



MH-108D

マイクロ止血鉗子 小、直 無鉤

全長：98mm

Haemostatic Forceps, small,
straight, serrated tip.



22-1250

18G 止血用イレーザー



M-121A

逆溝付デリケート輪匙 柄より先端までの長さ：40mm

ほとんど無抵抗でスムーズに挿入され、水晶体娩出に際し
てはノンスリップの効果があります。

Nucleus Loop, reverse cut fine serration.



M-100

イリゲーション輪匙

全長：52mm

Irrigating Lens Loop.



22-1204

凝固用標準輪子

耐久性に優れた軽量滅菌トレーシステムE.O.G. 滅菌・160℃高圧蒸気滅菌対応



M-1500A	器具 20本用	381×254×19 (内法)
M-6100A	器具 10本用	254×152×19 (内法)
M-6120A	器具 10本用×2段タイプ	254×152×38 (内法)
M-2700A	器具1～3本用 マットタイプ	190×64×19 (内法)
M-2572A	器具1～3本用 スロットタイプ	190×64×19 (内法)



スロット 5φ
59×16



※ 製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。



株式会社 **イナミ**



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000
JIS Q 9001:2000
EN ISO 13485:2000
ISO 13485:2003

本社及び美女木研究所にて
品質システムの認証取得

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目24番2号 TEL.03-3814-1735 FAX. 03-3814-3334

Website: <http://www.inami.co.jp> E-mail: corpinfo@inami.co.jp

名古屋：〒465-0094 名古屋市名東区亀の井3丁目208番地 TEL.052-704-2173 FAX.052-704-2174

大 阪：〒663-8143 兵庫県西宮市枝川町17番8号204 TEL.0798-41-7232 FAX.0798-41-6733

九 州：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1丁目17番17号 TEL.092-504-1734 FAX.092-504-5355